

6550 BILANCIA PORTATILE PER SEDIE A ROTELLE



*Detecto Model
6550 Bilancia
pieghevole portatile
per sedie a rotelle*

Bilance portatili per sedie a rotelle per un vantaggioso risparmio di tempo e confort per il paziente

- Capacità di carico 450 kg e con Wi-Fi opzionale
- Doppia rampa di accesso per caricare la carrozzina da entrambi i lati
- Rampe di accesso a pavimento per un facile posizionamento
- Bilancia portatile a ripiegamento verticale
- Dimensioni della piattaforma 81 cm x 91 cm

- Precisione di livello clinico a 0,2 lb / 0,1 kg
- Mobilità facile e veloce per il trasporto o lo stoccaggio
- Fino a 99 tare (opz.) memorizzabili della sedie a rotelle per una pesatura efficiente e veloce del paziente
- Visualizzazione del peso sul display dopo aver lasciato la bilancia
- Interfacciamento con PC o stampante via seriale, USB o Wi-Fi (opz.) o Ethernet cablata per la registrazione elettronica
- Identificazione del paziente tramite scansione del codice a barre. L'ID paziente fino a 14 cifre viene inviato al sistema centrale per la memorizzazione



Colonna facilmente ripieghevole

Con una sola mano puoi far scorrere rapidamente la leva di rilascio e abbassare la colonna della bilancia 6550 per facilitare il trasporto o la dislocazione in verticale.



Piattaforma sottile a profilo ribassato

La piattaforma è alta solo 56 mm per facilitare l'accessibilità e il comfort del paziente mentre si pesa in piedi o su una sedia a rotelle.

Pesatura a singolo passaggio per risparmiare tempo

Sfrutta i vantaggi che fanno risparmiare tempo, utilizzando il comodo pulsante o la tastiera per rimuovere la tara della sedia a rotelle.



WelchAllyn
OPZIONALE

StableSENSE
DIGITAL FILTERING

**EMR
EHR
ready**

WiFi
OPZIONALE

**RICHIIEDE SOLO
LA META' DELLO
SFORZO
PER POSIZIONARE LA
CARROZZINA SULLA
BILANCIA
RISPETTO AI MODELLI
DEI CONCORRENTI**

Le rampe a doppio accesso della 6550 arrivano fino a terra e consentono la massima praticità di carico e scarico dei pazienti da entrambi i lati della bilancia. Queste rampe uniche richiedono solo metà dello sforzo per l'operatore sanitario a trasportare un paziente con sedia sulla bilancia

DETECTO
www.Detecto.com

2-TRASPORTO FACILITATO

La colonna della bilancia 6550 si piega verso il basso e si blocca in modo sicuro per un facile trasporto in due direzioni, reso possibile dalle ruote a doppia direzione. La funzione di piegatura verticale della DETECTO 6550 minimizza lo spazio occupato sul pavimento quando non è utilizzata.

IDEALE PER L'USO IN AREE MULTIPLE

 **DETECTO**
www.Detecto.com

PAZIENTE OTTIMALE CHE PESA "IN MOVIMENTO"

Una delle bilance mediche più popolari nel settore, è stata ingegnosamente progettata per offrire un'ampia versatilità. Può essere utilizzata con sedie a rotelle, sedie a gambe dritte o come normale bilancia. La piattaforma di pesatura della 6550 misura 81 cm x 91 cm (posizione aperta e piatta). Le caratteristiche rampe inclinate da 20 cm (8") consentono un agevole accesso da entrambi i lati. Questa leggera bilancia digitale pieghevole è realizzata per massimizzare il confort di utilizzo e la cura del paziente.



MISURA EFFICIENTE:




L'indicatore di peso MedVue® della 6550 è il più avanzato nel settore clinico, con connessione seriale, EMR / EHR, USB, connettività Wi-Fi opzionale, calcolo dell'IMC, "tasti rapidi" gialli per la pesata di base e display LCD multilinea. La bilancia è alimentata da 6 batterie AA (non incluse) o opzionali alimentatore AC/DC esterno.

La bilancia DETECTO 6550 ha un bottone che permette di sottrarre la tara mostrando sul display solo il peso del paziente.



6550

BILANCIA PORTATILE PER SEDIE A ROTELLE

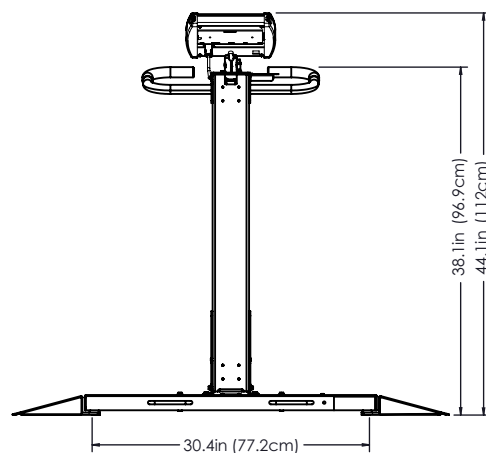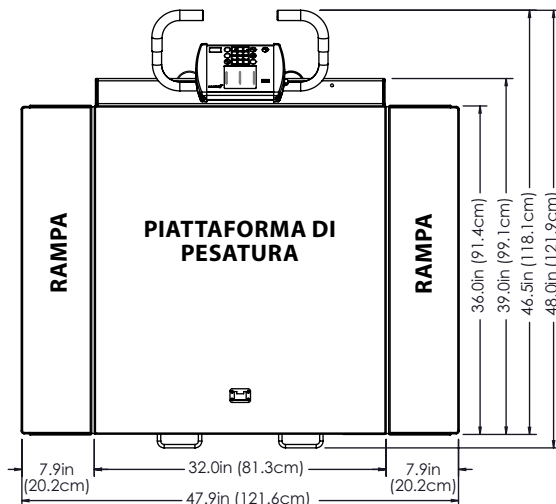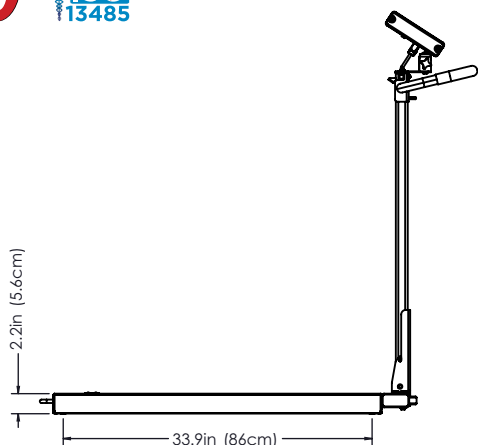

6550 Capacità	1,000 lb x 0.2 lb / 450 kg x 0.1 kg
6550KGEU Capacità	300 kg x 0,1 kg or 350 kg x 0,2 kg (OIML EC Classe III)
Dim. piattaforma	32 x 36 pollici / 81 cm x 91 cm
Display	Peso: Display LCD a 5 cifre, 7 segmenti, 7/8 pollici (22,2 mm) Altezza: Display LCD a 4 cifre, 7 segmenti, 1/2 pollici (12,7 mm)
Tastiera	Tipo di membrana con 19 chiavi
Connectività	RS232 serial USB (standard), Ethernet via cavo e Wi-Fi (opzionale)
Dim. del Display	6,8 pollici H x 7,6 pollici W x 1,8 pollici D (171,4 mm L x 193,8 mm H x 44,4 mm D)
Alimentazione	6 AA cell Alkaline, Ni-Cad o NiMH batteries (non include) o 12 VDC 1.25A wall plug-in AC power adapter (opzionale) (Detecto part number MV1PWR)
Risoluzione	5,000 divisioni, max
Temp. di esercizio	Da 14° a 104° F (da -10° a + 40° C)
UPC Code	809161139402
Peso netto	100 lb / 45 kg
Peso per il trasporto	120 lb / 54 kg

DETECTO si riserva il diritto di migliorare, o modificare caratteristiche e specifiche senza preavviso.

DETECTO
www.Detecto.com
203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153



Esegui la scansione di questo codice QR sullo smartphone per ulteriori informazioni sul prodotto.

Mobile: m.detecto.com

SOLD BY: