



icon®


BÁSCULAS CLÍNICAS DIGITALES

**BÁSCULAS CLÍNICAS
DIGITALES
CON VISOR A NIVEL
DE LA VISTA Y
TECNOLOGÍA DE
VANGUARDIA**

- Extra alta, con capacidad de 1,000 lb / 455 kg
- Plataforma ultra delgada de solo 1.5 pulgadas de altura
- Visor de LCD con pantalla táctil multicolor
- Muestra simultáneamente en pantalla el peso, la estatura y el IMC

**LECTURAS INSTANTÁNEAS
DE PESO, ESTATURA
+ IMC SIN PRESIONAR
UN SOLO BOTÓN**

El potente tallímetro sin contacto con sonar de las básculas icon combinado con un visor multifunción a color permite que el paciente simplemente se pare sobre la báscula y en un segundo usted podrá visualizar todas las medidas en forma instantánea en el visor sin tener que presionar una sola tecla, logrando así la máxima velocidad, higiene y precisión.

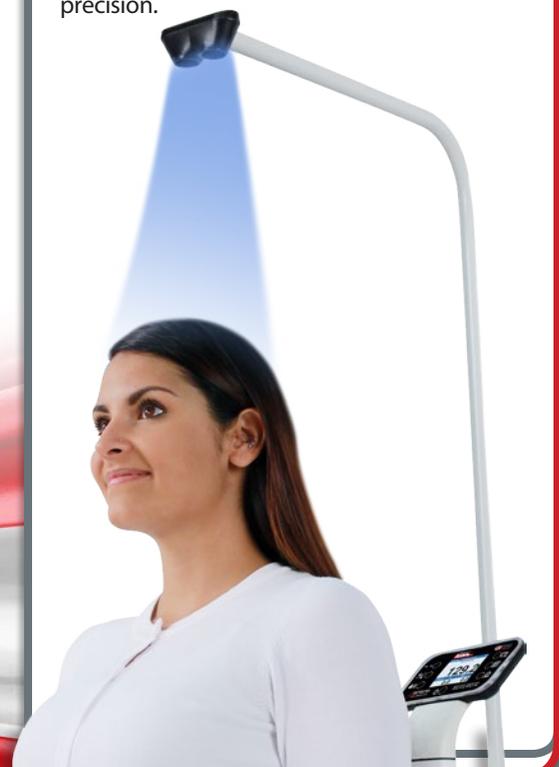

MÍNIMO ESCALÓN

La base prácticamente plana de las básculas icon tiene solo 1.5 pulgadas de altura, ofreciendo así el máximo confort y facilidad al paciente al momento de medirse. Además, una base extra ancha de 17 pulgadas de ancho por 17 pulgadas de profundidad permite el pesaje de pacientes bariátricos.

¡EL FUTURO EN EL PESAJE CLÍNICO DE PACIENTES YA HA LLEGADO!

TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN DE VANGUARDIA FABRICADA EN EE. UU QUE ES ICÓNICA

Cada tanto en la historia, la evolución de la tecnología de productos da un paso gigantesco hacia adelante. DETECTO ha sido pionero en el campo de la medición física desde 1900 y durante este tiempo ha estudiado en forma intensiva lo que se ha convertido en una experiencia increíble de pesaje clínico. Como resultado de más de un siglo de investigación, le presentamos la nueva báscula para pesaje clínico icon®.

Las básculas icon® fabricadas en EE. UU. por DETECTO representan la próxima generación de medición clínica digital. ¡No existe nada parecido a la icon® en el mercado!

La báscula clínica digital con visor a nivel de la vista icon® de DETECTO tiene una capacidad de rango doble de 0.2 lb/0.1 kg hasta 600 lb /300 kg y 0.5 lb /0.2 kg hasta 1,000 lb/500 kg. La plataforma de bajo perfil de 17" de ancho x 17" de profundidad es prácticamente plana con solo 1.5 pulgadas de altura. La icon® incluye un adaptador AC estándar de grado no médico y puede ser alimentada con 12 baterías AA (no incluidas). El tallímetro sin contacto con sonar permite que usted simplemente se pare sobre la báscula y en pocos segundos el peso, la estatura y el Índice de Masa Corporal serán mostrados en el visor sin tocar una sola tecla.



Las básculas icon® fabricadas en EE. UU. por DETECTO miden en forma eficiente el peso y la estatura de pacientes de todas las edades y medidas.



Las básculas icon® fabricadas en EE. UU. por DETECTO se arman fácilmente con solo sacarlas de la caja y sin necesidad de herramientas. El tallímetro con sonar se enchufa con facilidad en la parte de atrás de la columna y queda agarrado en forma firme mediante un clip en el indicador y el puerto de recepción en la columna.

- Diseño de producto elegante y delgado
- Cómoda visualización del peso al nivel de la vista
- Resistente construcción de la columna
- Calidad de construcción de fabricación en EE. UU. que puede apreciarse en todo el diseño de la báscula
- 4 modelos icon® estándar disponibles entre los que puede elegir





VISOR CON PANTALLA TÁCTIL MULTICOLOR

Las básculas icon® cuentan con un indicador de alta tecnología con el estilo de un teléfono inteligente (smartphone) fácil de usar con 7 botones simples y un claro visor de LCD para lecturas en gran tamaño.

- Lecturas de peso en LCD color azul clínico de 0.9 pulgadas de altura
- Visor de LCD con pantalla táctil multicolor
- Muestra simultáneamente en pantalla el peso, la estatura y el índice de Masa Corporal
- Mantiene bloqueado automáticamente el peso durante algunos segundos para poder visualizar y registrar fácilmente la medición
- El botón de menú proporciona un acceso rápido a una configuración del menú amigable para personalización de la báscula
- Indicación de nivel de carga de la batería

CONECTIVIDAD VERSÁTIL:

- 1 puerto USB-B
- Cumple con HL7 IEEE 11073 (estándar)
- Modelos con Ethernet Wi-Fi disponibles para Registro Médico Electrónico/ Registro de Salud Electrónico (EMR/EHR) inalámbrico
- Conectividad con dispositivo Welch Allyn® disponible: CVSM, CSM, y LXI (consulte la tabla de modelos en la página de atrás)

IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES



El visor brillante y multicolor con pantalla táctil de las básculas icon y sus menús de navegación a petición del usuario permiten el fácil ingreso de información tal como identificación numérica de 8 dígitos de los pacientes para EMR/EHR.

ADAPTADOR AC



Las básculas clínicas icon® de DETECTO incluyen un puerto USB-B, un nivel de burbuja integrado, un adaptador AC incluido en forma estándar, Wi-Fi opcional, y conectividad Welch Allyn EMR/ EHR disponible.

TRABADO AUTOMÁTICO



Cuando un paciente se para sobre la báscula, el peso, la estatura y el IMC se muestran todos en el visor y se mantienen automáticamente durante 7 segundos para que el profesional de la salud visualice y registre la información.

BATERÍAS



La cubierta de la plataforma puede ser quitada para su fácil limpieza y también para proporcionar acceso al compartimento de las baterías. Las básculas icon® pueden ser alimentadas con 12 baterías AA (no incluidas).

BÁSCULAS CLÍNICAS DIGITALES CON VISOR A NIVEL DE LA VISTA CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

BÁSCULAS DIGITALES icon® CON TALLÍMETRO CON SONAR Y VISOR A NIVEL DE LA VISTA

Modelo	ICON	ICON-WI	ICON-UWA	ICON-LXI	
Capacidad	600 lb x 0.2 lb / 1000 lb x 0.5 lb 300 kg x 0.1 kg / 500 kg x 0.2 kg				
Tallímetro	Tallímetro sin contacto con sonar				
Medidas del Tallímetro	24" (20') - 86" (7'2") x 0.2" / 60 cm - 218 cm x 0.5 cm				
DIMENSIONES	Dimensiones Generales	17" An x 18.5" Pr x 89.5" Al / 43 cm An x 47 cm Pr x 227.3 cm Al			
	Tamaño de la Plataforma	17" An x 17" Pr x 1.5" Al / 43.2 cm An x 43.2 cm Pr x 3.8 cm Al			
	LCD	Dígitos de 0.9 in / 2.3 cm de altura en el LCD			
ENERGÍA	Baterías	12 baterías AA (no incluidas)			
	Adaptador AC (incluido)	●	●	●	●
	Puertos	1 puerto serial RS232 y 1 puerto USB-B			
	Conectividad	Ethernet Wi-Fi	Welch Allyn CVSM/CSM	Welch Allyn LXI	
	Peso Neto	22 lb / 10 kg			
	Peso de envío	31 lb / 14 kg			
	Dimensiones de Envío	58" x 20" x 6" / 147 cm x 51 cm x 15 cm			
	Código UPC	809161198805	809161198904	809161199000	809161199109

DETECTO se reserva el derecho de mejorar, optimizar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.

VENDIDO POR:

 **DETECTO**
www.Detecto.com

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 EE. UU.
Teléfono: 417-673-4631 o 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

Móvil: m.detecto.com